国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 A61B 1/00

A1 |

(11) 国際公開番号

WO00/54652

(43) 国際公開日

(81) 指定国

2000年9月21日(21.09.00)

CN, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK,

(21) 国際出願番号

PCT/JP00/01558

(22) 国際出願日

2000年3月15日(15.03.00)

(30) 優先権データ

特願平11/114022

1999年3月17日(17.03.99)

国際調査報告書

JР

(71) 出願人;および

(72) 発明者

パンナチェート・エーカポット

(BHUNACHET EKAPOT)[TH/JP]

〒305-0821 茨城県つくば市春日2-32-22 Ibaraki, (JP)

添付公開書類


ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

(54)Title: METHOD FOR SUPERIMPOSING FLUORESCENT IMAGE ON BACKGROUND IMAGE BY CCD AND VIEWING THE IMAGES ON THE SAME SCREEN SIMULTANEOUSLY

(54)発明の名称 CCDにて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法

(57) Abstract

In fluorescent endoscopic examination, excitation light and light adjusted by an adjusting filter are alternately projected to an object under observation, the fluorescence light is received by a channel out of three channels by disposing filters before black-and-white or color CCD, or received with ut any filter by the channel of a color CCD which does not react with the excitation light but reacts with the fluorescent light, the light adjusted by an adjusting filter is received by the other two channels to capture the background image, the signals sent through the three channels are combined, and the fluorescent image is superimposed on the background image on a monitor. Thus, a sharp fluorescent image of bright field of view is. formed and viewed on the same screen simultaneously, and the portions where fluorescence is emitted can be easily specified in the background.

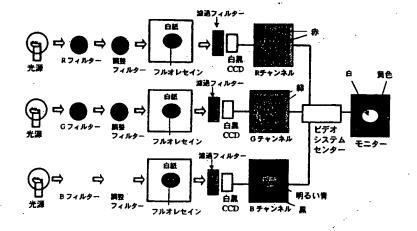

Charge coupled device (CCD) にて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法である。励起光と調整フィルターで調整した光を交互に被観察物に照射し、白黒ないしカラーのCCDの前に濾過フィルターをおいて、蛍光を励起光から取り出し、それを3つあるチャンネル(赤、緑、青)の内1つのチャンネルで受光しかつ強調したり、または、濾過フィルターなしで、励起光が出て蛍光を発生させたタイミングに、カラーCCDにて励起光(例えば、青光)とは反応しないが、励起光の照射を受けて発生した蛍光(例えば、黄色光)と反応するCCDのチャンネル(例えば、赤チャンネル)で受光し励起光から蛍光を取り出しかつ強調したりして、残りの2つのチャンネルにて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に画像にする。この方法を蛍光内視鏡検査に応用することによって、視野が明るくかつ鮮明な蛍光の映像が得られ、背景の中に蛍光を発しているところを特定しやすく生検などの操作は蛍光観察しながら簡単にできる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

アラブ首長国連邦 アンティグア・バー アルバニア アルメニア AM AT アルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバイジャン ボズニア・ヘルツェゴビナ AZ BA バルバドス BE ベルギ ブルギナ・ファン ブルガリア B J B R B Y ベナン ブラジル ファンル ベラルーシ カナダ 中央アフリカ CCFCCH スイス コートジボアール カメルーン 中国 コスタ・リカ キューバ キプロス

キルギスタン

北朝鲜

K P

ポルトガル

RSSSSIKLNZDGJMRTTTTTUUUUVYZZW UDEGGIKLNZDGJMRTTZAGSSSIKLNZDGJMRTTZAGSSIKLNZDGJMRTTZAGSSNUZDGJMRTTZAGSSNUZDGJMRTTTTTUUUUVYZZW

明細

· CCD にて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、

同時にかつ同じ画面で見る方法

技術分野

本発明は、charge coupled device (CCD) にて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法に関するものである。

背景技術

自家蛍光内視鏡システム及び光線力学的診断・療法 は通常の内視鏡検査で 10 は発見しづらい早期癌を検出する目的で最近開発された蛍光内視鏡検査であ る。しかし、これらの検査はファイバースコープと交換度カメラとの組み合 わせでなされているために操作性が悪く値段も高い。しかも、得られた蛍光 の映像は暗く、この映像を見ながら生検などの操作をするのは危険である。

フルオレセイン・ソジウムは蛍光眼底検査において血管造影剤として日常 15 的に使われている。その原理は、青光しか通さない励起フィルター exciter filter を使い光源からの光線に含まれている刺激光を可能な限り透過させ、 フルオレセインに当て蛍光を発生させて、今度は青光を完全にカットするが 発生した蛍光を可能な限り透過させる濾過フィルター barrier filterを使っ て 蛍光の映像だけを拾うというものである。

20 1975-1976 年に勝らはこの原理をファイバースコープによる胃内視鏡検査に応用し、粘膜における癌の浸潤範囲が分かると報告した。しかし、この20数年間、フルオレセイン蛍光内視鏡検査についての報告は全くない。 勝によると、その原因は次の通りである。

第一に、蛍光内視鏡の映像は暗く、撮影は high speed color film 25 (ASA160)を用い、シャッタースピード 1/8~1/15 で、4~8 倍に 増感現像しなければならない。勝らが使用した励起フィルターは fluorescein isothiocyanate (FITC) 干渉フィルター(千代田光学)であり、fluorescein の励起光の波長(495nm)を選択的に透過するものであった。また、ファイバースコープでは、フィルムの現像ができあがるまで所見の確認はできず臨床においてあまり実用的ではない。

第二に、電子スコープがファイバースコープに取って代わって広く使われるようになったことである。電子スコープに FITC 干渉フィルターをセットしてフルオレセイン蛍光内視鏡検査を行おとすると映像が非常に暗くなり、観察不可能になる。この問題を解決するためには強烈な光源が必要とされるが、今まで実現されなかった。また、FITC 干渉フィルターは薄いフィルム10 状のフィルターを重ねたものであり、これらのフィルム状のフィルターは通常の電子スコープの光源の熱でさえ長くは耐えられない。

第三に、ファイバースコープでは濾過フィルターの差し込みと取り外しは体外で簡単にできた。電子スコープでは濾過フィルターをスコープの先端にあるCCDの前に置く必要があるので、体内に挿入したあとでは簡単に差し込みと取り外しができなくなる。電子スコープを使うと通常と蛍光内視鏡検査を行うためには、通常の内視鏡と蛍光検査用の内視鏡を別々に2度挿入しなければならない。ということは、患者の苦痛が2倍、また、検査の時間も2倍になるわけである。

1993年に、戸田らはフルオレセインの注射後、大腸の電子内視鏡の映 20 像がどう変わるかをコンピューターを使って分析した。彼らは電子内視鏡の映像をデジタルのデータとして連続的に記録し、その後コンピューターで処理するというやり方をとった。つまり、彼らも電子スコープを用いてreal timeで蛍光の変化を見ることはできなかったのである。

25 発明の簡単な開示

1.5

最近、我々は、青光しか通さない励起フィルターの代わりに青光をよく通すが緑も赤もある程度通過させるブール系の色温度変換フィルター(以降調整フィルターと呼ぶことにする)を使用すれば、電子スコープに、よるフル

20

2 5

オレセイン蛍光内視鏡検査を行うことができ、しかも十分に明るい視野も得られることを発見した。実際、フルオレセイン蛍光電子内視鏡検査を早期胃癌患者に施行したところ、通常の内視鏡検査と比べ、早期胃癌の範囲が鮮明かつ正確に知ることができ、癌に対する粘膜切除の際癌の取り残しがないようにするために非常に役に立つ検査であることが分かった。これまでに、早期胃癌に対するフルオレセイン蛍光電子内視鏡検査の所見とその重要性を下記の学会で発表したが、本発明に関する内容は一切発表していない。(1.平成 10年2月21日、茨城がん学会、パネルディスカッション第5番。

- 2. 平成10年9月30日、日本癌学会総会、一般演題第2111番。3.
- 平成10年11月19日、日本消化器内視鏡学会総会、一般演題第23番。)なぜ、我々の電子スコープによるフルオレセイン蛍光内視鏡検査法で強い蛍光が得られ、しかも視野はあまり暗くならないのかを分析した結果、我々の方法はCCDにて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法であることが分かった。つまり、励起光と調整フィルターで調整した光を交互に被観察物に照射し、白黒ないしカラーのCCDの前に濾過フィルターをおいて、蛍光を励起光から取り出し、それを3つあるチャンネル(赤、緑、青)の内1つのチャンネル(例えば、青)で受光しかつ強調して、残りの2つのチャンネル(例えば、赤と緑)にて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモ

ニター上に画像にするところを特徴とする方法である。

図面の簡単な説明

図1は、フルオレセイン蛍光電子内視鏡検査用調整フィルター(ブルー系の色素温度変換フィルター)と励起フルオレセイン撮影用明るい青のフィルター (Kodak Wratten Filter No 4 7 A)そして 濾過フィルター (Kodak Wratten Filter, No 15)の分光特性を示す。

図2は、フルオレセインのついた白紙を被観察物にして、色々と条件を変えて電子スコープで撮影した写真である。A, 通常観察の写真。B-Fは濾過フィ

1 0

2 5

ルターのみ、Gは調整フィルターと濾過フィルター、Hは励起フルオレセイン撮影用明るい青のフィルターと濾過フィルター。B(min), B(med),B(max) は、青チャンネルの信号がそれぞれ弱、中、強である。また、R(min),R(med),R(max)もそれぞれ赤チャンネルの信号が弱、中、強である。

図3は、濾過フィルターと白黒CCDにて蛍光の映像と背景の映像を融合させて、同時にかつ同じ画面で見るフルオレセイン蛍光電子内視鏡のシステムを現す模式図である。 RGB band pass filtersを容れた枠は絶えず回っているが、調整フィルターはスイッチで光源の前に差し込んだり外したりすることができる。

図4は、濾過フィルターと白黒CCDにて蛍光の映像と背景の映像を融合させて、同時にかつ同じ画面で見るフルオレセイン蛍光電子内視鏡のメカニズムを示す模式図である。

図5 は、直腸ポリープを対象に撮影した電子内視鏡写真である。A は、通 常観察で撮影した写真である。B-E は、R G B band pass filters に加え て調整フィルターを光源の前に差し込んで対物レンズに濾過フィルターを取 り付けた電子スコープで経時的に撮影したフルオレセイン蛍光内視鏡写真で ある。F は、調整フィルターに変えて励起フィルター(Kodak Wratten Filter No 4 7 A)を光源の前に差し込んで撮影したフルオレセイン蛍光内 2 の 視鏡写真である。

図6 は、光学顕微鏡のカラーCCDでとらえた白紙についたフルオレセインの模様である。A は、白い光を当てRGB3チャンネルともに同時に見た映像である。B は、励起光の青光を当て赤チャンネルのみで見た映像である。C は、本発明に記載の調整フィルターで調整した光を当て緑と青チャンネルでみた映像である。

図7は、本発明の請求項4に記載の濾過フィルターなしで、カラーCCDにて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法のシステム模式図である。

図8は、フルオレセイン蛍光内視鏡検査における本発明の請求項5に記載の 濾過フィルターなしで、カラーCCDにて蛍光の映像と背景の映像を融合さ せ、同時にかつ同じ画面で見る方法のメカニズムを示す模式図である。

5 発明の詳細な開示

本発明の「Charge coupled device (CCD) にて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法」のメカニズムと作用を次のような実験で説明する。

実験1

- 10 <u>方法</u>: ごく薄い濃度のフルオレセインの付いた白紙を電子スコープ (Olympus, GIF, XQ 200) にて
 - 1. 通常の観察
 - 2. 対物レンズ(CCD)に濾過フィルター(Kodak Wratten Filter No 15) をに取り付けた状態、
- 3. 光源の前に調整フィルター (Olympus LB(B) 200)を光源の前に挿入し、かつ対物レンズ (CCD) に濾過フィルター (Kodak Wratten Filter No 15) をに取り付けた状態、
 - 4. 調整フィルターに変わって、光源の前に励起フルオレセイン撮影用明るい青のフィルター (Kodak Wratten Filter No 4 7A)を光源の前に挿入し、
- 20 かつ対物レンズ(CCD)に濾過フィルター (Kodak Wratten Filter No 15) をに取り付けた状態、

の条件下で観察及び撮影した。

使用した内視鏡の光源装置はOLYMPUS,CLV-U20D、ビデオシステムセンターは OLYMPUS,CV-200である。励起、調整及び濾過フィルターの分光

25 特性を図1に示してある。

<u>結果</u>:励起及び調整フィルターなしの通常の観察では、白紙は白く見え、白紙につけたフルオレセインの模様は黄色に写る(図2A)。 しかし、対物

レンズ(つまり、CCD)に濾過フィルターを貼り付けた電子スコープで観察すると、励起及び調整フィルターなしで、白紙の白い部分は黄色に、また、フルオレセインの模様は白い蛍光を発し浮き出て見える(図2B)。この蛍光は、青チャンネルの信号を強くすると強くなり(図2C)、逆に弱くするとほとんど消えてしまう(図2D)。赤チャンネルの信号を強くすれば、白紙の白い部分はオレンジに写り(図2E)、弱くすれば緑っぽくなるが(図2F)、蛍光の強さには影響はない。

光源の前に、本発明の請求項3の調整フィルターを差し込んで、対物レンズ(つまり、CCD)に濾過フィルターを貼り付けた電子スコープで観察すると、白紙の白い部分はやはり黄色く写るが、調整フィルターがない時と比べると幾分暗くなる。フルオレセインの模様も調整フィルターがない時と同様に白い蛍光を発するが、その明るさはより増して輪郭もよりはっきり見える(図2G)。

光源の前に、励起フルオレセイン撮影用明るい青のフィルターを差し込ん 15 で、対物レンズ(つまり、CCD)に濾過フィルターを貼り付けた電子スコープで観察すると、フルオレセインの模様に青い蛍光はみえるが、白紙の白い部分は非常に暗くなってしまい、赤チャンネルの信号を強くしても明るくはならない(図2H)。

- 20 考察:実験に使った光源装置では、光源の前に三原色RGBの band pass filters を置き、それを回転させて順次に三原色の光を作り出し、被観察物でに照射する。そして、被観察物から順次に反射してくる三原色の光を内視鏡先端の白黒のcharge coupled device (CCD) にて受光し電気信号に変える。つまり、三原色の赤の時はCCDで受けた電気信号は赤チャンネルとして、
- 25 緑の時は緑チャンネルとして、そして、青の時は青チャンネルとして扱い、 送信後ビデオシステムセンターによってモニター上に画像を再構成している (図3)。

対物レンズ(つまり、ССО)に濾過フィルターを貼り付けた電子スコー

10

15

プで観察すると、励起及び調整フィルターなしでもフルオレセインの蛍光が 観察できたのは、三原色の青が白紙につけたフルオレセインに当たって黄色 の蛍光を発生させていたからである。そして、濾過フィルターを通過した際、 白紙の白い部分から反射した青は遮断され、フルオレセインの蛍光だけが通 過して白黒のCCDに達するので、青チャンネルでは白い部分は暗く、フル オレセインの模様は明るい青に写る(図4)。このことは、モニターの青の チャンネルだけを残して、赤と緑のチャンネルのケーブルを抜いてみると確 かめることができる。フルオレセインの蛍光は黄色であるが、實チャンネル で信号化されるので青信号になる。また、電子信号であるために、モニター の音を強くすることによって、フルオレセインの蛍光を強調することができ る。赤と緑のphaseでは、白紙の白い部分もフルオレセインの模様もほぼ同 じ位赤と緑を反射し、また、濾過フィルターは赤と緑をよく通すので、赤と 緑のチャンネルでは白紙の白い部分もフルオレセインの模様も明るく写る (図4)。従って、青、赤、緑の3つのチャンネルを合わさった映像は、白 紙の白い部分は黄色に、フルオレセインの模様は白に写る(図2B、図4)。 このように、フルオレセインの蛍光は青チャンネルで電子信号化しているの で、青チャンネルの信号を強くすれば明るくなり(図2C)、弱くすればほ とんど消えてしまう(図2D)。

青色の調整フィルターを使用した場合、青のphaseでは調整フィルター を通った三原色の青光の励起作用が加算され、より強いフルオレセインの蛍 光を発生させるので、結果的にフルオレセインの模様の輪郭がより鮮明になる。赤と緑のphaseでは、調整フィルターによってある割合でカットされる ので白紙の白い部分は調整フィルターがない時と同様の 黄色を 呈するが、より暗くなる(図2G)。励起フルオレセイン撮影用明るい青のフィルター を使用した場合、フルオレセインの模様は輪郭ははっきりするが、色は青のみで逆に今までの2つの条件より暗くなってしまう。また、白紙の白い部分も白紙の輪郭もまったく分からない位非常に暗く、モニターの赤を強くしても改善されない。これは、このフィルターが三原色の赤と緑がほぼ完全に遮

10

1 5

20

25

断されているからである(図1)。青のphaseの時は、今までの2つの条件と同様、白紙の白い部分は暗く写り、フルオレセインの模様は青く写る。赤と緑のphaseでは、原色の赤と緑が完全に遮断されているので、全体的に暗くなってしまう。従って、赤、緑及び青のチャンネルを全部合わせても、白紙の白い部分は暗いまま、そしてフルオレセインの模様も青のまま、今までの2つの条件のように明るい白にはならない(図2H)。

実験2:直腸病変に対するフルオレセイン蛍光内視鏡検査

〈材料と方法〉: 観察中視野が暗くなるというのはそれだけ穿孔を起こしたりする危険性が高くなるので、まず内視鏡の操作が簡単な直腸病変に対して蛍光内視鏡検査を行ってみた。対物レンズに濾過フィルター (Kodak Wratten Filter No 15)を取り付けた電子スコープ (Olympus, GIF, XQ 200)を挿入し、病変を映し出しておく。次に、フルオレセイン・ソジウム 5 ml 静注すると同時に調整フィルター (Olympus LB(B) 200)を光源の前に入れて観察を行う。観察の後半、比較するために励起フルオレセイン撮影用明るい青のフィルター (Kodak, Wratten Filter, No47A)に変えて観察した。観察はモニターの青信号を最強に、そして赤信号を最小にして行う。 結果: 濾過フィルターを通して観察すると通常赤く見える (図 5A) ポリー

電光・超過フィルターを通じて観景すると通吊がく見える (図 5 A) ホリープや直腸壁は黄色く映り、本発明の請求項 3 に記載の調整フィルターを光源の前に差し込んで見るとやや緑色を帯びてくる。フルオレセイン・ソジウムを静注してから15-20 秒後にまずポリープに白い蛍光が現れ (図 5 B) 、さらに30秒後には正常粘膜の小血管や粘膜内にも現れてくる (図 5 C) 。蛍光が現れ初めてから2-3分後には直腸壁全体に蛍光がいきわたり (図 5 D) 、徐々に弱くなっていくが数分立ってもまだ観察できる (図 5 E)。その間、通常の内視鏡検査と比べて多少視野が暗くなるが、血管など腸管壁の構造は十分わかり、通常通り、写真撮影やカラープリ ンターで印刷することもできた。調整フィルターを励起フィルター (Kodak Wratten Filter No. 47A) に変えると視野全体が暗い青となり、腸壁の構造は見えなくなってしまう

(図5F)。

考察:この実験で、励起光である青光しか通さない励起フィルターを電子スコープに使用すると、実際体内において視野が真っ暗になって観察不能になることを確かめることができた。その理由は、実験1ですでに説明してある。また、励起フィルターではなく青光をよく通過させるが、緑と赤もある程度通す調整フィルターを使うと今まで不可能とされていた電子スコープによるフルオレセインの蛍光の変化をreal timeに追うことができ、しかも視野もかなり明るい。

すでに、学会などで発表しているが、早期胃癌に対するフルオレセイン蛍 光内視鏡検査には2つの pattern が観測された。癌病変に最初から最後ま で蛍光が現れないものと、最初は周囲の正常組織と同様に蛍光が出現し、そ の後早い段階ないし3-4分位立ってから周囲の蛍光が弱くなっていくのに対 し癌病変に蛍光がまだより強く残るものである。いずれの pattern であっ ても、蛍光の強さに差があるため癌と正常粘膜との境界ははっきり見えた。

- 15 写真を提示していないが、蛍光電子内視鏡検査をおこなっている最中に調整フィルターを外してみると、胃粘膜全体が通常観察と同じ位明るくなり、癌病変と正常粘膜との間の蛍光の差が分からなくなってしまう。実験1でも触れたように、フルオレセインを励起して蛍光を発生させるには光源装置から出る原色の青光だけで十分であるが、調整フィルターと併用することにより、
- 20 蛍光がさらに強くなり、しかも背景の映像の明るさは押さえられるので、蛍 光の映像を背景の映像から際立たせることはできるのである。

蛍光の映像は暗いという問題は図3に示した蛍光電子内視鏡システムで解決できたが、このシステムにはまだ不便な点がある。つまり、電子スコープのCCDの前に濾過フィルターを聞くと一回の挿入で通常及び蛍光内視鏡検25 査を行えないのである。通常の観察と蛍光による観察両方を行いたい場合、別々の電子スコープを2回挿入しなければならない。我々の経験から、効率に小さい癌を発見するためには、蛍光観察している最中に瞬時に通常観察に繰り替えたり、また通常観察から蛍光観察に戻したりできたほうがよいこた

が分かっている。これを実現するために、電子スコープではなく、ファイバースコープで映像を体外に取り出し、体外でCCDと接続すれば、濾過フィルターを体外で入れたり外したりすることができるので、ファイバースコープを挿入したまま蛍光観察と通常観察との間に繰り替えることができる。もう一つの方法として、濾過フィルターなしで、フルオレセイン蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法がある。この方法とは、励起光と調整フィルターで調整した光を交互に被観察物に照射し、励起光(例えば、青)が出て蛍光を発生させたタイミングで、カラーCCDにて、励起光とは反応しないが、励起光の照射を受けて発生した蛍光(例えば、黄色)と反応するチャンネル(例えば、赤チャンネル)で受光し励起光から蛍光を取り出して強調し、残りの2つのチャンネル(緑と青)にて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に画像にする方法である。

まず、カラーCCDと白黒CCDの違いを説明する。

15 実験1そして2に使われた電子スコープOlympus, GIF, XQ200 は白黒CCDを使用しており、光源装置のOLYMPUS,CLV-U20D、ビデオシステムセンターの OLYMPUS,CV-200と一緒に使わないとカラーの映像は得られない。というのは、白黒CCDでは、三原色の赤、緑、青は区別できず、暗いか明るいかで判別し電子信号化している。カラーの映像を作り出すために20 は、光源の前に三原色RGBの band pass filters を置き、それを回転させて順次に三原色の光を送り、被観察物を照射する。赤の光が出た時には、被観察物から反射してくる光を内視鏡先端の白黒のCCDにて受光し赤チャンネルに、緑光の時は緑チャンネルに、そして、青光の時は青チャンネルに電気信号化して、送信後ビデオシステムセンターによってモニター上に画像を25 再構成している。白黒CCDの利点は内視鏡の挿入部を小さくすることができるからである。

一方、カラーCCDは白光に含まれている三原色のRGBを直接区別できるので、光源の光をRGBの band pass filtersを通さなくても、カラーの

1 5

20

2 5

映像を得られるわけである。

我々が、カラーCCDを光学顕微鏡に接続させ、モニター上映像をみる装置を使って、フルオレセインのついた白い紙を被観察物にして(図6A)、 濾過フィルターなしで蛍光を励起光から取り出す方法を検討した結果、励起 光の青光とは反応しないが、励起光を受けて発生する蛍光の黄色光と反応するカラーCCDの赤チャンネルで受光し電子信号化すれば、紙の白い部分から反射してきた励起光は写らず、フルオレセインの蛍光のみが赤く写ることが分かった(図6B)。また、励起光ではなく調整フィルターで調整した光を被観察物に当てて、カラーCCDの緑と青のチャンネルで反射してきた光を映像化すると、紙の白い部分は青緑に写り、フルオレセインの模様は黄色く見える(図6C)。赤チャンネルの蛍光の映像と緑と青チャンネルの背景の映像を融合すれば、紙の白い部分は青緑に、そしてフルオレセインの模様はオレンジ色になるはずである。

以下、電子スコープを使って、フルオレセイン蛍光内視鏡検適査を例にして、濾過フィルターなしで励起光から蛍光を取り出し、背景の映像と融合させて、同時にかつ同じ画面でみる方法を説明する(図7、図8)。実験1と同様にフルオレセインの付いた白い紙を被観察物にする。光源装置のband pass filters に 励起フィルターの役割をする原色の青のフィルターだけを本来原色の赤のフィルターがあるところに残しておく。本来原色の青と緑フィルターがあるところは素通りにする。band pass filters を回転させないで光源の光が素通りできる位置に合わせて置けば、通常観察ができる。蛍光内視鏡検査時、band pass filtersの枠を回転させると同時に調整フィルターを光源の前に差し込む(図7)。励起光の原色の青が被観察物であるフルオレセインの付いた白紙に当たると、フルオレセインに蛍光が発生し黄色く光るが、白紙の白い部分は青光をそのまま反射する。励起光が出た時には、カラーCCDの赤チャンネルしか働かないように設定してあるので、カラーCCDは青光と反応せず、黄色蛍光の光と反応して、赤チャンネルではフルオレセインのあるところだけが赤く写り、それ以外のところは黒く写る

(図8)。そして、カラーCCDの青と緑のチャンネルのphaseでは、調整フィルターによりある割合で緑と赤をカットされた光が被観察物に当たり、反射された光を青と緑のチャンネルで受光すると、フルオレセインの模様は薄い黄色に写り、白紙の白い部分は青緑っぽく写る(図8)。赤、緑、青の3つのチャンネルを合わせてモニター上画像を再構築すると紙の白い部分は青緑に、そして、フルオレセインの模様はオレンジに写る(図8)。

以上、本発明のCharge coupled device (CCD) にて蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法のメカニズムと作用をフルオレセイン蛍光内視鏡検査を例に説明してきたが、これらの作用はフルオレセイン蛍光内視鏡検査に限定するものではなく、その他の蛍光内視鏡検査、例えば、自家蛍光内視鏡検査や光線力学的治療法にも有効である。また、CCDが挿入部の先端にある電子スコープに限定するものでもなく、ファイバースコープを用い、体内から映像を取り出して、体外でCCDと接続するやり方についても有効である。また、我々がフルオレセイン蛍光電子内視鏡検査に使ったのは、光源装置はOLYMPUS,CLV-U2OD、電子スコープはOlympus, GIF, XQ 200 そして ビデオシステムセンターはOLYMPUS,CV-20であったが、本発明の実施できる器械はそれらのものに限定するものではない。

2.0 発明の効果

10

1 5

通常の蛍光検査法は、鮮明な蛍光の映像を得るために、光線に含まれている刺激光だけを通過させる励起フィルター と刺激光だけを完全にカットするが発生した蛍光を可能な限り透過させる濾過フィルター を使って 蛍光の映像だけを拾うというものである。フルオレセイン眼底検査のように体外から観察する場合、背景の映像が真っ暗で蛍光の映像だけがはっきり見えればよいのだが、内視鏡検査のように体内に器械を挿入しなければ観察でけない場合、蛍光の映像だけだと視野が暗くて色々な不都合が生じる。例えば、スコープの操作は難しくなり穿孔などの危険が増してくる。また、蛍光を発し

10

1 5

たところはどこなのか同定しづらいなどである。

今までの説明でも明らかなように本発明の蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法は、励起光と調整フィルターで調整した光を交互に被観察物に照射し、白黒ないしカラーのCCDの前に濾過フィルターをおいて、蛍光を励起光から取り出し、それを3つあるチャンネル(赤、緑、青)の内1つのチャンネル(例えば、青)で受光しかつ強調して、残りの2つのチャンネル(例えば、赤と緑)にて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に画像にすることによって、背景の中に蛍光を発しているところを特定しやすくするだけでなく、従来の蛍光だけの映像と比べて視野が明るくしかも蛍光の映像も鮮明である。生検や粘膜切除などの操作が、蛍光観察をしがら簡単にできる。

本発明の方法に記載の調整フィルターは、励起光をよく通すがそれ以外の 光をある割合でカットするところに特徴を有し、蛍光の映像と背景の映像を 融合させ、同時にかつ同じ画面で見る際に、背景の映像の色調や明るさを調 整して蛍光の映像がはっきり見えるようにする効果がある。フルオレセイン 蛍光内視鏡検査においては、青をよく通すが、赤と緑をある割合でカットす るブルー系の色温度変換フィルターが調整フィルターの働きをする。

また、本発明に記載の濾過フィルターなしで、蛍光の映像(例えば、フル20 オレセイン蛍光)と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法は、励起光と調整フィルターで調整した光を交互に被観察物に照射し、励起光(青光)が出て蛍光を発生させたタイミングで、カラーCCDにて励起光(青光)とは反応しないが、励起光の照射を受けて発生した蛍光(黄色光)と反応するCCDのチャンネル(赤チャンネル)で受光し励起光から蛍光を取り出して強調し、残りの2つのチャンネル(青と緑)にて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に画像にすることにより、背景の中に蛍光を発しているところを特定しやすくするだけでなく、従来の蛍光だけの映像と比べて視野が明る

くしかも蛍光の映像も鮮明である。生検や粘膜切除などの操作が、蛍光観察をしがら簡単にできる。CCDの前に濾過フィルターを置くことがないので、電子スコープの一回の挿入で、通常及び蛍光内視鏡検査を両方行うことができる。

5 現在行われている蛍光内視鏡検査、つまり自家蛍光システムや光線力学診断・治療はファイバースコープと高感度カメラとの組み合わせでなされているために、操作性が悪く値段も高い。得られる映像も蛍光の映像だけであるので、視野はかなり暗い。一方、電子スコープによる蛍光内視鏡検査は不可能とされてきたが、本発明によりフルオレセイン電子内視鏡検査が可能になり、しかも明るい視野及び鮮明な蛍光の映像が得られる。通常使われている電子スコープにフィルターを取り付けるだけ、又は、ちょっと工夫しただけで本発明による蛍光内視鏡検査が行えるようになるので、値段は安い。本発明の方法を自家蛍光システムや光線力学診断・治療に応用すれば、costを押さえることができるはずである。

請求の範囲

- 1 蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法として、励起光と調整フィルターで調整した光を交互に被観察物に照射し、白黒ないしカラーCCDの前に濾過フィルターをおいて、蛍光を励起光から取り出し、それを3つあるチャンネル(赤、緑、青)の内1つのチャンネル(例えば、青)で受光しかつ強調して、残りの2つのチャンネル(例えば、赤と緑)にて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に画像にするところを特徴とする方法。
- 2 請求項1に記載の方法において、蛍光の映像と背景の映像を融合させ、 同時にかつ同じ画面で見る際に、背景の映像の色調や明るさを調整して蛍光 の映像がはっきり見えるようにするフィルターとして、励起光をよく通すが それ以外の光をある割合でカットするところを特徴とする調整フィルター。
- 15 3 請求項1 に記載の方法に基づいたフルオレセイン蛍光内視鏡検査用調整 フィルターとして、青をよく通すが、赤と緑をある割合でカットするところ を特徴とするブルー系の色温度変換フィルター。
- 4 濾過フィルターなしで、蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法として、励起光と調整フィルターで調整した光を交互に被観察物に照射し、励起光が出て蛍光を発生させたタイミングで、カラーCCDにて励起光(例えば、青光)とは反応しないが、励起光の照射を受けて発生した蛍光(例えば、黄色)と反応するCCDのチャンネル(例えば、赤チャンネル)で受光し励起光から蛍光を取り出して強調し、残りの2つのチャンネル(例えば、青と緑)にて、調整フィルターで調整した光で背景の
- 25 映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に画像に するところを特徴とする方法。
 - 5 濾過フィルターなしで、フルオレセイン蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見る方法として、励起光と調整フィルターで調

整した光を交互に被観察物に照射し、励起光の青が出て蛍光を発生させたタイミングで、カラーCCDにて、励起光の青光とは反応しないが、励起光の照射を受けて発生した蛍光の黄色の光と反応する赤チャンネルで受光し励起光から蛍光を取り出して強調し、残りの2つのチャンネル(緑と青)にて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に画像にするところを特徴とする方法。

図 1


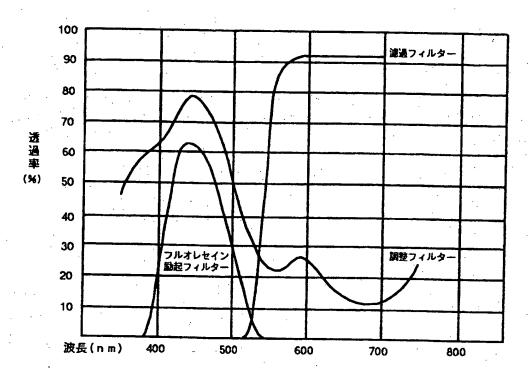


図 2

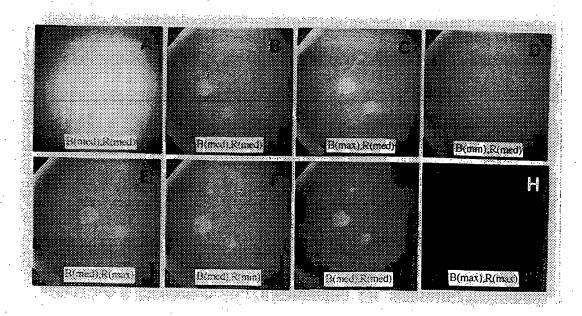

2/4

図 3

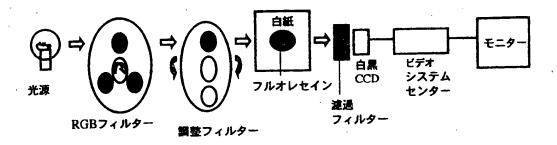


図 4

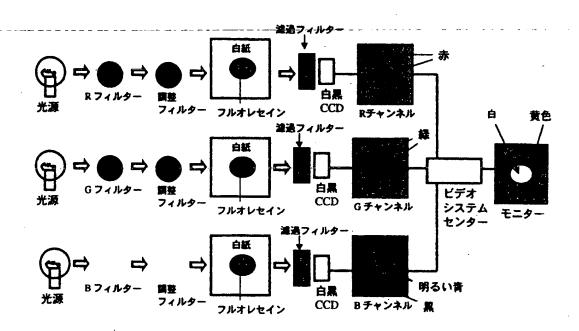


図 5


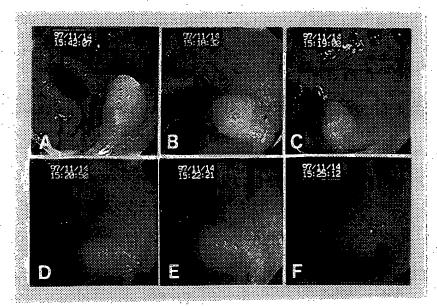


図 6

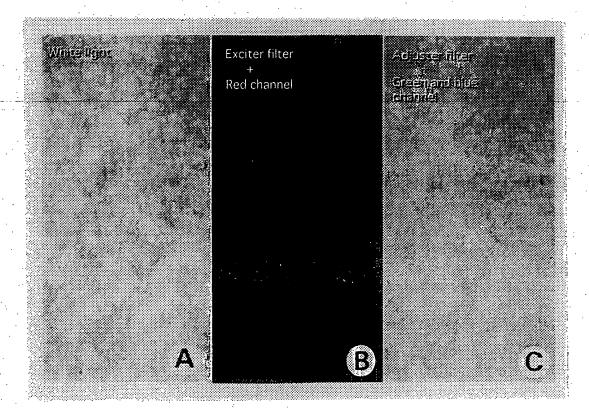

4/4

図 7


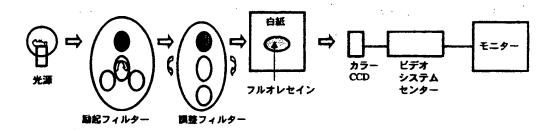


図 8

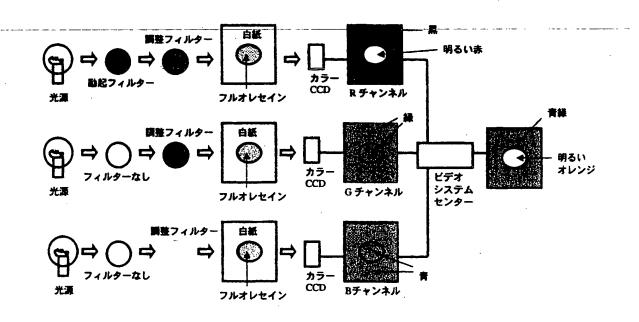

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/01558

A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ A61B 1/00					
A	International Patent Classification (IPC) or to both nation	onal classification and IPC	i			
	S SEARCHED	onal classification and 12 c				
	ocumentation searched (classification system followed by	v classification symbols)				
Int.						
			<u></u>			
Jits Koka	ion searched other than minimum documentation to the e uyo Shinan Koho 1922-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K	oho 1994-2000 oho 1996-2000			
	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y	JP, 9-327433, A (Xillix Technol 22 December, 1997 (22.12.97), Full text; Figs. 1 to 6 & US, 5647368, A & EP, 79261		1-5			
Y	JP, 9-154812, A (Matsushita Electric June, 1997 (17.06.97), Full text; Figs. 1 to 7 (Famil	1-5				
A	JP, 8-140928, A (ASAHI OPTICAL 04 June, 1996 (04.06.96), Full text; Figs. 1 to 5 & DE, 19535114, A	Co., Ltd.),	1-5			
Fromb	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
			ernational filing date or			
"A" docum consid "E" earlier date "L" docum cited t specia "O" docum means "P" docum	al categories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance redocument but published on or after the international filing ment which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other al reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or other s nent published prior to the international filing date but later the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
23	actual completion of the international search June, 2000 (23.06.00)	Date of mailing of the international sea 04 July, 2000 (04.0	rch report 7.00)			
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer				
Facsimile 1	No.	Telephone No.				

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. cl7 A61B 1/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. cl⁷ A61B 1/00-1/32

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996

日本国公開実用新案公報

1971-2000

日本国登録実用新案公報 1994-2000

日本国実用新案登録公報

1996-2000

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

4,6月,1996(04.06.96)全文、第1-5図

C. 関連する	ると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 9-327433,A(ジリックス・テクノロジイズ・コーポレーイション) 22. 12月. 1997(22. 12. 97)全文、第1-6図 & US, 5647368, A & EP, 792618, A	1-5
Y	JP,9-154812,A(松下電器産業株式会社) 17.6月.1997(17.06.97)全文、第1-7図(ファミリーなし)	1-5
A	JP,8-140928,A(旭光学工業株式会社)	1-5

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す

& DE, 19535114, A

- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 **論の理解のために引用するもの**
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

23.06.00

国際調査報告の発送日

0 4.07.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 松本 征二

2W | 9212

電話番号 03-3581-1101 内線 3290

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

<u> </u>			<u> </u>
Applicant's or agent's file reference PCT-9902	FOR FURTHER AC	CTION SeeNo	ificationofTransmittalestnternational Preliminary nation Report (Form PCTMPEA/416)
International application No.	International filing dat	e (day/month/ye	ar) Priority date (day/month@par),
PCT/JP00/01558	15 March 200	0 (15.03.00)	17 March 1999 (17.03.99)
International Patent Classification (IPC) or n A61B 1/00	national classification and	d IPC	
Applicant	BHUNACHE	ET, Ekapot	
This international preliminary examinand is transmitted to the applicant action.	ination report has been p ecording to Article 36.	repared by this I	nternational Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	sheets, i	including this co	ver sheet.
This report is also accompar been amended and are the base Rule 70.16 and Section 607 of	sis for this report and/or s	sheets containing	description, claims and/or drawings which have grectifications made before this Authority (see the PCT).
These annexes consist of a tot	tal of 3 sh	neets.	TC 3
3. This report contains indications relat	ing to the following item	ns:	
I Basis of the report			RECEIVED
II Priority			/EC 200:
		novelty, inventiv	ve step and industrial applicability
IV Lack of unity of inve			
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with ations supporting such sta	regard to novelt atement	y, inventive step or industrial applicability;
VI Certain documents co	ited		
VII Certain defects in the	e international application	n	
VIII Certain observations	on the international appl	lication	
	·		
Date of submission of the demand	Tr	Date of completi	on of this report
28 August 2000 (28.08		,	18 June 2001 (18.06.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP		Authorized office	er
Facsimile No.	, 1	Геlephone No.	

Translation

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/01558

I. E	Basis (of the re	eport				
1.	With	regard to	the elements of the intern	ational application	:*	· · · · · ·	
		the inte	rnational application as ori	ginally filed			
	X	the des	cription:				
		pages			1-14		, as originally filed
		pages					, filed with the demand
		pages			, filed with the	e letter of	
	\boxtimes	the clai	ms:				
		pages			2,3,5		, as originally filed
		pages			, as amend	ded (together w	ith any statement under Article 19
		pages					, filed with the demand
_	_	pages		4	, filed with the	e letter of	19 April 2001 (19.04.2001)
	\leq	the drav	vings:				
		pages			1/4-4/4		, as originally filed
		pages					, filed with the demand
_	_	pages			, filed with the	e letter of	
L	th	ie sequei	nce listing part of the descri	ption:			
		pages	 				, as originally filed
		pages		-			, filed with the demand
		pages			, filed with the	e letter of	
IJ	hese	element the lang	al application was filed, un s were available or furnishe guage of a translation furnis guage of publication of the guage of the translation fur	less otherwise indied to this Authority hed for the purpos nternational applic	cated under this item. In the following langues of international searce cation (under Rule 48.3	ch (under Rule	Authority in the language in which which is: 23.1(b)). amination (under Rule 55.2 and/
3. V		containe filed tog furnishe	to any nucleotide and/or amination was carried out of ed in the international applite ether with the international d subsequently to this Author d subsequently to this Author	on the basis of the cation in written for application in cornority in written for	sequence listing: orm. nputer readable form. rm.	the internation	al application, the international
		internati	onal application as filed ha ement that the information	s been furnished.			beyond the disclosure in the
4. [ti ti	endments have resulted in the description, pagesne claims, Nosne drawings, sheets/fig				
5. [□ T	his repo	ort has been established as ne disclosure as filed, as inc	if (some of) the an licated in the Supp	nendments had not bee lemental Box (Rule 70	en made, since 2.2(c)).**	they have been considered to go
in	place this d 70.	report	eets which have been furni as "originally filed" and	shed to the receivi are not annexed	ng Office in response to this report since t	to an invitation they do not co	under Article 14 are referred to ontain amendments (Rule 70.16
** An	ıy rep	olacemer	nt sheet containing such am	endments must be	referred to under item	l and annexed	to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/01558

V. Reasoned statement under Artic citations and explanations support		elty, inventive step or industrial applicab	oility;
1. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-5	YES
•	Claims		NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES
	Claims		NO
			110

2. Citations and explanations

Claims 1-5

Document 1: JP, 3-97441, A (OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED), 23 April 1991 (23.04.91), full text, Figs. 1-12

Document 2: JP, 10-295633, A (OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED), 10 November 1998 (10.11.98), full text, Figs. 1-3

Document 3: JP, 2-299633, A (OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED), 11 December 1990 (11.12.90), full text, Figs. 1-9

Document 4: JP, 3-97439, A (OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED), 23 April 1991 (23.04.91), full text, Figs. 1-5

Document 5: Microfilm of the specification and drawings annexed to the written application of Japanese Utility Model Application No. 402510/1990 (Laid-open No. 92306/1992) (ICHIKOH INDUSTRIES LTD.), 11 August 1992 (11.08.92), full text, Figs. 1-12

In a graduated-face-type fluorescent light endoscope, finding a fluorescent light image on one channel of a CCD and finding a background image on the remaining two channels, and then fusing and displaying the fluorescent light image and the background image on a monitor that reconstructs these images is not disclosed in the documents cited in the ISR or in any of the aforesaid documents 1-5 and does not appear to be obvious.

HT

特許協力条約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 0	3 JUL 2001	
WIPO	PCT	

出願人又は代理人 の書類記号 PCT-9902	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP00/01558	国際出願日 (日.月.年) 15.03.00	優先日 (日.月.年) 17.03.99						
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ A 6 1	B 1 / 0 0							
出願人 (氏名又は名称) パンナチェート・エーカポット								
2. この国際予備審査報告は、この表紙 区 この国際予備審査報告には、所 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT: この附属書類は、全部で 3 3. この国際予備審査報告は、次の内容 I 区 国際予備審査報告の基礎 II 優先権 II 例先権 II 例先権 II 例先権 II 例第明の単一性の欠如	9明細書、請求の範囲及び/又は図面も発実施細則第607号参照) 実施細則第607号参照) 	ージからなる。 の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 添付されている。						
国際予備審査の請求書を受理した日	国際予備審查報告	シ作成した日						

I. 国際予備審査	報告の基礎			
1. この国際予備 応答するため PCT規則70.	に提出された差し替え用紙	に基づいて作成さ は、この報告書に	れた。(法第6条(PC? おいて「出願時」とし、2	T 1 4条)の規定に基づく命令に 本報告書には添付しない。
出願時の国	奈出願書類			
X 明細書 明細書 明細書	第 <u>1-14</u> 第 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と	
区 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 <u>2,3、5</u> 第	項、 項、 	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基 国際予備審査の請求書と	甚づき補正されたもの こ共に提出されたもの
X 図面	第 1、4	^{項、}	出願時に提出されたもの	
図面図面	第	ページ/図、 ページ/図、		付の書簡と共に提出されたもの
明細書の配列	刊表の部分 第 刊表の部分 第 刊表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの国際予備審査の請求書と	
	類の言語は、下記に示す場合 下記の言語である	合を除くほか、この 語である	_	
国際調査	のために提出されたPCT 則48.3(b)にいう国際公開の 審査のために提出されたP	*規則23.1(b)にいっ の言語	の翻訳文の言語	語
3. この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ	ノ酸配列を含んでは	おり、次の配列表に基づき	国際予備審査報告を行った。
□ この国際 □ 出願後に □ 出願後に ■ 書面によ	があった	キシブルディスク は調査)機関に提 は調査)機関に提 が出願時における	出された書面による配列3 出されたフレキシブルデノ 国際出願の開示の範囲を表	
4. 補正により、下 明細書 請求の範囲 図面	記の書類が削除された。 第 第 図面の第	ページ 項 ペーシ	。 ⁵ /図	
れるので、そ	審査報告は、補充欄に示し の補正がされなかったもの る判断の際に考慮しなけれ	りとして作成した。	(PCT規則70.2(c) こ	囲を越えてされたものと認めら の補正を含む差し替え用紙は上

															_							
			は産	業上	の利用	用可能	も性に	[つ	いて	の法第	第12	2条	(P	СТ	3 5 \$	₹(2))	に気	≧める	見解、	それを	を裏付	ける
見解																						
新規性	(N)												1	5								有無
進歩性	(IS)								į	請求の 請求の	の範囲	B _	1	- 5				_ .				<u>有</u> 無
産業上の)利用可	能性	(1	A)					## E	請求の 請求の	の範囲	# #	1	- 5								有無
 文献及	とび説明	(P	C T	規則7	70. 7)																	
		J	Ρ,	3 -	- 9 月.	7 4	4 4 9 9	1 1	, <i>A</i>	A (2 3	オリ . (リン) 4	/パ, :・	ス光 9 1	:学 <u>·</u>),	工業 全	株式 文,	会第	社) 1 —	1 2 [図	
文献	献2:	J 1	P, 0.	1 1	0 一 1 月	2 :	9 5 1 9	6 9	3 3 8	3, (1	A 0.	(オ 1	-リ: 1.	ンパ	スラ 8)	光学 ,	工業 全文	美株 :	式会 第 1	社) 一 3 [図	
文献		J 1	P, 1.	2 - 1 :	- 2 2 月	9 :	9 6 1 9	3 9	3, 0	A (1	(z 1.	トリ 1	ン 2	パス	光 ² 0)	学工 ,	業材 全文	k式:	会社 第 1) — 9 [図	
文献	献4 :	J 2	P, 3.	3 - 4)	- 9 月.	7 4	4 3 9 9	9 1	, <i>A</i>	A (2 3	オリ . (リン) 4	/パ, :・	ス光 9 1	学),	工業 全	株式 文,	会第	社) 1 —	5 図		
文献	願	をした	開 4 たマ	ー!	9 2 クロ	3 (フ)	0 6 ィル	号ム) (ī	り願け光	書に 工業	2孫 2林	対式	した 会社	.明á :)	書	及て	が図i	面の	内容	を .	
背景の明 こ蛍光の	央像を ひ映像	:残 と	りの背景)2 f との呼	チャ 映像	ンを	ネル 独合	でさ	拾っせる	って て表	から示す	o、 -る	それ	れら とは	の	央像 国際	を再 調査	手構/ を報	成し 告に	モニ? 列挙:	合い ター され	、 上 た
	文見 規 歩 業 文 請 配 所の光 の 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	文献 解性性 生業 対 がのででいます。 がのでででいます。 ないでででいます。 がいででいまする。 がいででいまする。 ないでででいまする。 ないででいまする。 ないででは、 ないででいまする。 ないでは、	文 新 進 産 支 見 規 性 上 よ 未 本 大<	文献 財 見解 期 見解 別 日	文献及び説明 見解 新規性(N) 進歩性(IS) 産業上の利用可能性(IA) 産業上の利用可能性(IA) 産業上の利用可能性(IA) のででである。 ででである。 ででである。 ででは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は	文献及び説明 見解 新規性(N) 進歩性(IS) 産業上の利用可能性(IA) 産業上の利用可能性(IA) 産業上の利用可能性(IA) のが、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、	東京	文献及び説明 見解 新規性 (N) 進歩性 (IS) 産業上の利用可能性 (IA) 文献及び説明 (PCT規則70.7) 719 749 719 7	文献及び説明 見解 新規性 (N) 進歩性 (IS) 産業上の利用可能性 (IA) 文献及び説明 (PCT規則70.7) 清求の範囲 1 - 5	東京						文献及び説明 1-5 請求の範囲 1-5 請求の範囲 1-5 請求の範囲 1-5 請求の範囲 1-5	文献 2 「J P, 10-295633, A (オリンパス光学 10.11月.1998 (10.11.12.90), 文献 3: J P, 2-299633, A (オリンパス光学 11.12月.1990 (11.12.90), 文献 4: J P, 3-97439, A (オリンパス光学 11.12月.1990 (11.12.90), 文献 5: 日本国実用新案登録出願 2-402510号(田暦公別4-92306号)の願書に添付した明細書記録したマイクロコイルム (市光工業株式会社) 11.8月.1992 (11.08.92), 全面順次式の蛍光内視鏡において、蛍光の映像をCCDの目の質別の映像を残りの2チャンネルで、安北の映像をCCDの明像を融合させて表示することは、国際	文献及び説明 見解	文献及び説明 見解 1 - 5	大献及び説明	大献及び説明	大献及び説明

請求の節囲

蛍光内視鏡検査において、励起光(例えば、青)とそれ以外の光(例え ば、緑と赤)を交互に組織に照射し、組織から反射してきた光を感受する白 黒CCDの前に励起光は通過させないがそれ以外の光をすべて通す濾過フィ ルターをおいて、励起光(例えば、青)が組織に当たって蛍光(例えば、黄 色)を発生させたタイミングで濾過フィルターを通過できた蛍光をCCDの 3 つあるチャンネル(赤、緑、青)の内 1 つのチャンネル(例えば、青)で 受光し励起光から蛍光を取り出して、励起光以外の光(例えば、緑と赤)の 時はCCDの残りの2つのチャンネル(例えば、緑と赤)にて背景の映像を 1 0 拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に蛍光の映像と 背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見るところを特徴とする光診 断装置。

5

1 5

- 請求光1の光診断装置において、背景の映像の明るさを弱めるために、 光源と組織の間に励起光(例えば、青)を多く通すが、それ以外の光(例え ば、緑と赤)もある程度通す調整フィルターを設置してあるところを特徴と する光診断装置。
- 濾過フィルターなしで蛍光内視鏡検査が行える光診断装置として、励起 光と励起光(例えば、青)を多く通すが、それ以外の光(例えば、緑と赤) もある程度通す調整フィルターで調整した光を交互に組織に照射し、励起光 20 が出て組織に当たって蛍光を発生させたタイミングで、カラーCCDにて励 起光(例えば、青光)とは反応しないが、励起光の照射を受けて発生した蛍 光(例えば、黄色)と反応するCCDのチャンネル(例えば、赤チャンネル) で受光し励起光から蛍光を取り出して、残りの2つのチャンネル(例えば、 青と緑)にて、調整フィルターで調整した光で背景の映像を拾い、送信後3 2 5 つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に蛍光の映像と背景の映像を融

合させ、同時にかつ同じ画面で見るところを特徴とする光診断装置。 ブルオレセイン蛍光内視鏡検査において、白光の光源の前に赤、緑、青 の原色のフィルターを回転させ、順次に原色の光を組織に照射し、さらに光

15/1

源と組織の間に調整フィルターとして青をよく通すが赤と緑もある程度通過

させる青系の色温度変換フィルターを置き、組織から反射してきた光を感受する白黒CCDの前に励起光の青は通過させないがそれ以外の光をすべて通す濾過フィルターをおいて、励起光の青が組織に当たって蛍光を発生させたタイミングで濾過フィルターを通過できた蛍光(黄色)をCCDの3つあるチャンネル(赤、緑、青)の内1つのチャンネル(例えば、青)で受光し励起光から蛍光を取り出して、残りの2つのチャンネル(例えば、赤と緑)にて、調整フィルターで緑と赤の強度を落とした光で背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見るところを特徴とする光診断装置。

5

- 10 5 濾過フィルターなしで、フルオレセイン蛍光内視鏡検査が行える光診断装置として、白光の光源の前に励起フィルターとしての原色の青のフィルターの枠と2つの素通りの枠を有する板を回転させ、さらに光源と組織の間に調整フィルターとして青をよく通すが赤と緑もある程度通過させる青系の色温度変換フィルターを置き、励起フィルターが光源の前に来て励起光が出て組織に当たって蛍光を発生させたタイミングで、カラーCCDにて青の励起光とは反応しないが、励起光の照射を受けて発生した黄色の蛍光と反応するCCDの赤チャンネルで受光し励起光から蛍光を取り出して強調し、また素通りのわくが光源の前に来た時はCCDの緑と青のチャンネルで背景の映像を拾い、送信後3つのチャンネルの信号を再構成しモニター上に蛍光の映像と
- 20 背景の映像を融合させ、同時にかつ同じ画面で見るところを特徴とする光診断装置。



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

, = =		
出願人又は代理人 の事類記号 PCT-9902		査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 記5を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP00/01558	国際出願日 (日.月.年) 15.03.00	優先日 (日.月.年) 17.03.99
出願人(氏名又は名称) パンナチェート・エーカポ _ン	v	
国際調査機関が作成したこの国際調 この写しは国際事務局にも送付され		18条)の規定に従い出願人に送付する。
この国際調査報告は、全部で	2 ページである。	
│ │ <mark>│</mark> この調査報告に引用された先行	技術文献の写しも添付されている。	
	くほか、この国際出願がされたもの された国際出願の翻訳文に基づき国際	
b. この国際出願は、ヌクレオチ □ この国際出願に含まれる		次の配列表に基づき国際調査を行った。
	されたフレキシブルディスクによる 酢	己列表
□ 出願後に、この国際調査権	幾関に提出された書面による配列表	
□ 出願後に提出した書面に 書の提出があった。		スクによる配列表 質の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 こる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
	ができない(第I欄参照)。	
3. 発明の単一性が欠如して		
	類人が提出したものを承認する。	
	に示すように国際調査機関が作成し	た。
5. 要約は X 出	J願人が提出したものを承認する。	,
<u> </u>		規則第47条 (PCT規則38.2(b)) の規定により この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ ができる。
6. 要約書とともに公表される図に		□ なし
第4 図とする。区 出		<u> </u>
	d願人は図を示さなかった。 ≤図は発明の特徴を一層よく表してい	,
1 1 4	^図は光切り付以で ̄ 眉よヽX ししV	് പ



A. 免奶の腐りる分野の分類(国际付許方規(116)	Α.	発明の属する分野の分類	(国際特許分類((IPC))
----------------------------	----	-------------	----------	-------	---

Int. cl' A61B 1/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. cl⁷ A61B 1/00-1/32

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922 - 1996

日本国公開実用新案公報

1971-2000

日本国登録実用新案公報

1994 - 2000

日本国実用新案登録公報

1996-2000

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連	すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP, 9-327433,A(ジリックス・テクノロジイズ・コーポレーイション) 22. 12月. 1997(22. 12. 97)全文、第1-6図	1-5
	& US, 5647368, A & EP, 792618, A	
Y	JP,9-154812,A(松下電器産業株式会社) 17.6月.1997(17.06.97)全文、第1-7図(ファミリーなし)	1-5
A	JP, 8-140928, A (旭光学工業株式会社) 4,6月,1996(04.06.96)全文、第1-5図 & DE,19535114, A	1-5

── C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 23.06.00	国際調査報告の発送日 0 4.07.00
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 松本 征二 2W 9212
日本国行所 (13A/ JF) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3290

PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU	
PCT	То:	
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE	
Date of mailing (day/month/year) 25 October 2000 (25.10.00)	in its capacity as elected Office	
International application No. PCT/JP00/01558	Applicant's or agent's file reference PCT-9902	
International filing date (day/month/year) 15 March 2000 (15.03.00)	Priority date (day/month/year) 17 March 1999 (17.03.99)	
Applicant BHUNACHET, Ekapot		
вногименет, екарог		
1. The designated Office is hereby notified of its election made: X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 28 August 2000 (28.08.00) in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 28 August 2000 (28.08.00) in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35